

Handbuch &
Garantie



poma brush



WILLKOMMEN IN DER POMA FAMILIE

Vielen Dank, dass Sie sich für PomaBrush entschieden haben, die leistungsstärkste elektrische Silikonzahnbürste.

Wir haben PomaBrush mit dem Ziel erfunden, die Mundhygiene zu revolutionieren, indem wir ein glattes, nahtloses und angenehmes Putzerlebnis schaffen.

Das Handstück der PomaBrush fühlt sich sanft und weich an, liegt leicht in der Hand und ist perfekt ausbalanciert. Drücken Sie den Button und spüren Sie, wie die einzigartige PomaBrush aus Silikon zum Leben erwacht.

Mit Liebe,
das PomaBrush-Team

EIGENSCHAFTEN

Bürstenkopf & Handstück aus Vollsilikon


Die weichen antimikrobiellen Silikonborsten verletzen weder Ihr Zahnfleisch, noch Ihren Zahnschmelz, sondern bieten eine sanfte Massage während der Reinigung.

Benötigt nur 3 Aufladungen pro Jahr

Die Bürste selbst hält mit einer Ladung ca. 1 Monat und ihr kompaktes kabelloses Case verlängert diese um weitere 3 Monate.

Unglaubliches Design & taktiles Gefühl

PomaBrush hat den A`Design Award 2020 für sein minimalistisches und durchdachtes Design gewonnen.

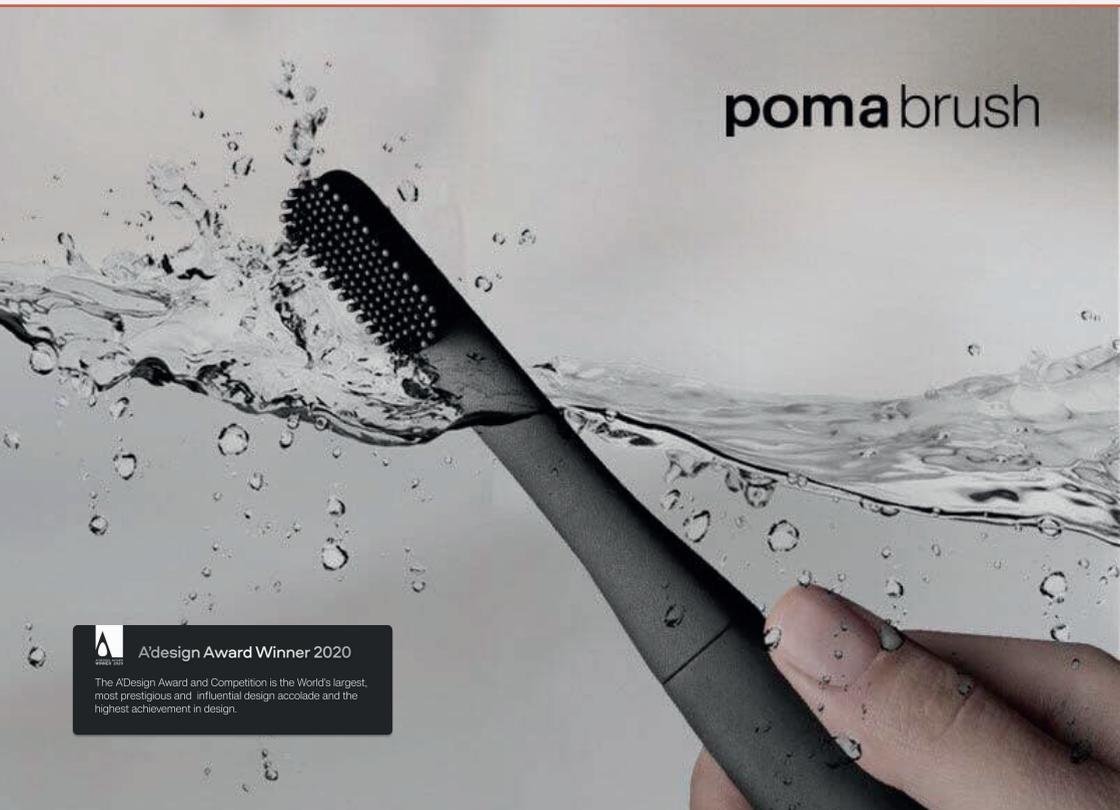


poma brush



A`design Award Winner 2020



The A`Design Award and Competition is the World's largest, most prestigious and influential design accolade and the highest achievement in design.

WAS IST IN DER BOX?

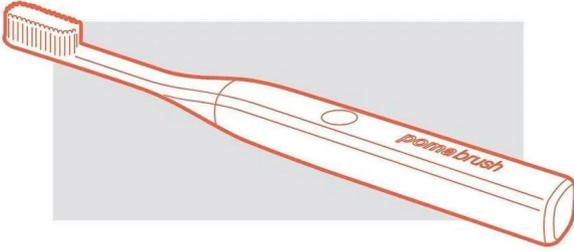


PomaBrush

Ladekabel
(USB-C)

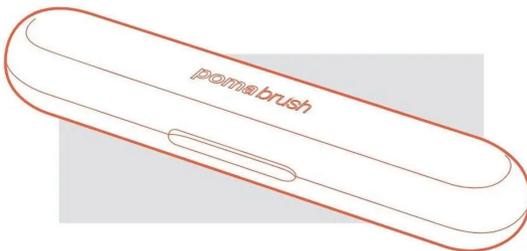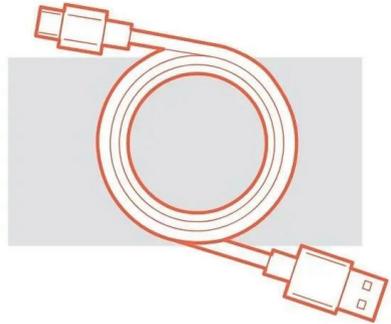


PomaCase

WIE POMABRUSH FUNKTIONIERT

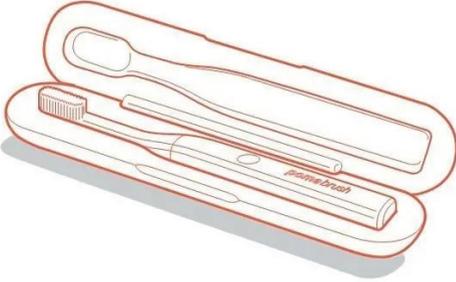


01 / PomaBrush begleitet Sie überall hin. Das kabellose Gehäuse sorgt für eine stets geladene PomaBrush und schützt sie, wenn sie nicht verwendet wird.

02 / Verwenden Sie Ihre Lieblingszahnpaste und tragen Sie eine erbsengroße Menge auf den Bürstenkopf auf.

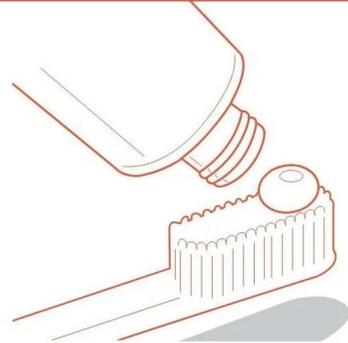

03 / Drücken Sie die Starttaste. Der eingebaute Timer vibriert alle 30 Sekunden. Die perfekte Reinigung dauert 2 Minuten. Putzen Sie dabei immer von rot (Zahnfleisch) nach weiß (Zahn).

WIE POMABRUSH FUNKTIONIERT


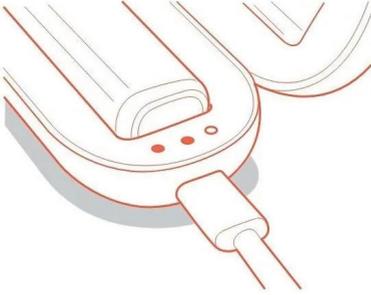


Die Aufladung

Laden Sie das kabellose Gehäuse alle 3 Monate mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB-Typ-C-Kabel auf. Die LEDs geben ein visuelles Feedback, wenn es vollständig aufgeladen ist.

Wechsel des Bürstenkopfes

Silikonköpfe verschleißten viel langsamer als Nylonbürstenköpfe. Ersetzen Sie den PomaBrush-Kopf alle 6 Monate, indem Sie ihn herausziehen und abnehmen.

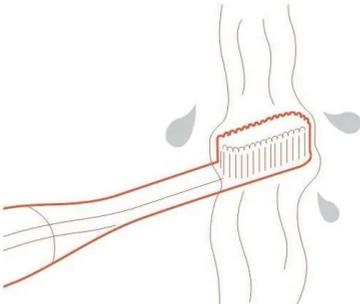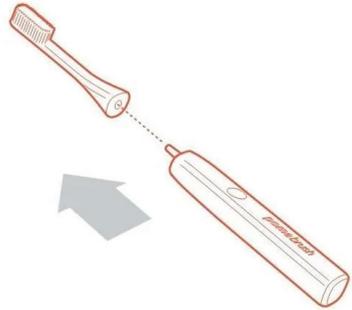

Pflege von PomaBrush

Reinigen Sie die Bürste nach jeder Benutzung unter kaltem Wasser, trocknen Sie das Handstück ab und legen Sie die Bürste wieder in das kabellose Gehäuse.

POMABRUSH FAQ

Ist PomaBrush eine Schallzahnbürste?

Ja, PomaBrush ist eine Schallzahnbürste. Schallzahnbürsten haben vibrierende Bürstenköpfe, die die Borsten mit hoher Geschwindigkeit in Schwingung versetzen. Schallbürsten haben ca. 10.000–30.000 Schwingungen pro Minute, verglichen mit maximal 7.500 Umdrehungen pro Minute bei einer standardmäßigen oszillierenden (kleine kreisförmige Köpfe, die sich hin und her drehen) Zahnbürste, die den Zahnschmelz mit diesen Bewegungen schädigen kann.

Was ist der Unterschied zwischen Silikon- und Nylon-Bürstenköpfen?

PomaBrush sorgt mit seinen Silikonborsten für eine umfassende Reinigung und ist extrem sanft, selbst für empfindliche Zähne und Zahnfleisch. Unsere weichen antimikrobiellen Silikonborsten verletzen weder Ihr Zahnfleisch noch Ihren Zahnschmelz, Zahnfleischbluten durch harte Borsten gehört der Vergangenheit an.

Hat PomaBrush einen eingebauten Timer?

Ja! Mit seinem eingebauten 2-Minuten-Timer und 30-Sekunden-Erinnerungen zum Wechseln der Putzbereiche fördert PomaBrush die von Zahnärzten weltweit empfohlenen korrekten Zahnputzgewohnheiten.

Wie oft muss ich das PomaCase aufladen?

PomaBrush wurde für Ihren mobilen Lebensstil entwickelt. Ob für eine Auslandsreise oder ein Last-Minute-Büromeeting, PomaCase hält Ihre Bürste mit einer einzigen Ladung 4

Monate lang aufgeladen.

Wie lange hält PomaBrush ohne Ladebox?

Eine PomaBrush Ladung hält ca. 1 Monat lang und das kompakte, kabellose Gehäuse verlängert diese um weitere 3 Monate.

Muss ich meine Bürste im PomaCase aufbewahren?

PomaBrush wird mit einem kabellos aufladbaren PomaCase geliefert, das zum Aufbewahren und Aufladen Ihrer Bürste verwendet werden kann.

Sollte ich meine PomaBrush trocknen, bevor ich sie in das PomaCase lege?

Wir empfehlen, die Kontaktpunkte der PomaBrush zu trocknen, bevor Sie sie in das PomaCase legen. Sie können Ihre Bürste einfach mit einem Handtuch abwischen.

Muss ich mit PomaBrush eine Zahnpasta verwenden?

Ja! Verwenden Sie PomaBrush einfach mit Ihrer Lieblingszahnpasta.

Welche Putztechnik sollte man mit PomaBrush anwenden?

PomaBrush ist eine Schallzahnbürste. Das bedeutet, dass Sie beim Bürsten nicht viel Druck ausüben müssen. Sie müssen lediglich leicht über Ihre Zähne gehen, um sie gründlich zu putzen. (Das hier würde ich definitiv erweitern)

SUPPORT HERSTELLERGARANTIE

Bitte kontaktieren Sie unseren After Sales Support per E-Mail, bevor Sie das Gerät einsenden. Dadurch können wir bei möglichen Bedienfehlern unterstützen.

Kundendienst

service@smile-store.de

Modellnummer

PMBRSH001

WEEE-Nummer

DE 34151065

Service Center DACH

smilestore Zahnkosmetik

Kay Link

Girardetstraße 64

D-45131 Essen

+49 (0)201 453 549 -0

Garantiebedingungen

Die PomaBrush Garantie bietet Ihnen umfangreiche Vorteile:

Garantiezeit

2 Jahre ab Kaufdatum

3 Monate auf Verschleißteile und Verbrauchsmaterialien bei normaler und bestimmungsgemäßer Verwendung (z. B. Akkus)

Kostenlose Reparatur/Austausch

Um einen Garantieanspruch geltend zu machen, senden Sie uns bitte:

1) Den fehlerhaften Artikel zusammen mit dem Original-Kaufbeleg und der ausgefüllten Garantiekarte (in der Box).

2) Das Produkt mit allen Bestandteilen, die in der Verpackung enthalten sind.

Die Garantie deckt keine Schäden ab, die verursacht wurden durch:

- Unfall oder unvorhergesehene Ereignisse (z. B. Blitzschlag, Wasser, Feuer);
- Unsachgemäße Verwendung oder Transport;
- Missachtung der Sicherheits- und Wartungshinweise;
- Sonstige unsachgemäße Behandlung oder Veränderung des Produkts.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie noch die Möglichkeit Ihr Produkt auf eigene Kosten reparieren zu lassen. Ist die Reparatur oder der Kostenvoranschlag nicht kostenfrei, werden Sie vorab entsprechend informiert.

Diese Garantie beeinträchtigt nicht Ihre gesetzlichen Rechte. Für den Fall, dass ein Produkt zur Reparatur eingeht, übernehmen weder das Serviceunternehmen noch der Verkäufer eine Haftung für eventuell vom Kunden auf den Produkten gespeicherte Daten oder Einstellungen.

BATTERIEVERORDNUNG

smilestore verkauft Batterien und Akkus bzw. solche Geräte, die Batterien und Akkus enthalten, d.h. wir sind nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:

Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus gesetzlich verpflichtet. Altbatterien können Schadstoffe enthalten, die bei nicht sachgemäßer Lagerung oder Entsorgung die Umwelt oder Ihre Gesundheit schädigen können. Batterien enthalten aber auch wichtige Rohstoffe wie z.B. Eisen, Zink, Mangan oder Nickel und werden wieder verwertet.

Sie können die Batterien nach Gebrauch entweder ausreichend frankiert an uns zurücksenden oder in unmittelbarer Nähe (z.B. im Handel oder in kommunalen Sammelstellen) unentgeltlich zurückgegeben.


Die Adresse für die Rücksendung lautet:

smilestore Zahnkosmetik

Kay Link

Girardetstraße 64

D-45131 Essen

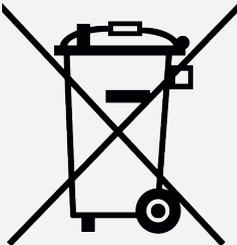

Die durchgekennzeichnete Mülltonne bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen dürfen.

Unter diesen Zeichen finden Sie zusätzlich nachstehende Symbole mit folgender Bedeutung:

Pb: Batterie enthält Blei

Cd: Batterie enthält Cadmium

Hg: batterie enthält Quecksilber