

DeSensiDent is intended to relieve tooth sensitivity that you get from cold, heat, acids and sweets.

PRODUCT DESCRIPTION

DeSensiDent has two key components, which when used together, will effectively reduce sensitivity for an extended period of time. The first component, DeSensiDent tooth serum, is to be brushed on twice a day, replacing your current toothpaste. The second component, the DeSensiDent nHAp™ sponges, are then applied to the areas of sensitivity once a week.

HOW DOES DESENSIDENT HELP TO RELIEVE TOOTH SENSITIVITY?

Tooth sensitivity is caused by damaged enamel and receding gums, which leads to exposed dentinal tubules. These exposed areas allow fluid to move more freely within the tubules, pulling or pushing on your nerves. The result of this fluid movement, is the nerve sending a signal to the brain, that you perceive as tooth sensitivity. DeSensiDent uses a patented nano-Hydroxyapatite (nHAp™) formula to remineralize the exposed dentin tubules and repair the damaged enamel. The result of the remineralization is repair of the enamel, by covering the open tubules, which relieves sensitivity.



SAFETY WARNINGS

If irritation occurs, discontinue use and seek advice from your physician or contact your local Poison Control Center. Do not use product if you are allergic to any of the ingredients listed on the box.

مزيل الحساسية المقصود بها إزالة الحساسية من الأسنان الناتجة من البرودة والحرارة والأحماض والحلويات.

مواصفات المنتج

مزيل الحساسية لديه مكونان رئيسيان عند الإستخدام مع بعضهما سوف تحفز الحساسية لفترة ممتدة من الوقت المكون الأول، فصل مزيل الحساسية للأسنان والذي يجب استخدامه مرتين يومياً بدل معجون الأسنان الذي تستخدمه المكون الثاني، إسفنح ح النانو هيدروكسي أباتيت، والذي يتم تطبيقه على أماكن الحساسية مرة واحدة بالإسبوع.

كيف يساعد منتج مزيل الحساسية الأسنان على التخلص من الحساسية؟

تحدث الحساسية بالأسنان نتيجة تضرر المينا أو تراجع اللثة والتي تؤدي إلى كشف الأنابيب. هذه المنطقة المكشوفة تسمح للسائل بالتحرك بحرية أكبر خلال الأنابيب تدفع وتسحب على أعصابك. نتيجة هذه الحركة أنها ترسل إشارة إلى الدماغ التي تسبب الحساسية بالأسنان. مزيل الحساسية يعتمد على مادة النانو هيدروكسي أباتيت في تركيبه لملئ الأنابيب المفتوحة بالعاج وتقوم بإصلاح الضرر بالمينا والنتيجة هي إعادة المعادن المفقودة وإصلاح مينا الأسنان وذلك بتغطية الأنابيب المفتوحة والتي تسبب الحساسية.



تحذير


إذا حصل تهيج، لا تستمر بإستعمال المنتج وإطلب المشورة من المختص. أو إتصل بمركز مكافحة السموم المحلي لا تستعمل المنتج في حال لديك حساسية من أي من مكوناته المذكورة على العلبة.





nHAp™ DeSensiDent
SENSITIVITY RELIEF

MANUFACTURED IN THE NETHERLANDS
BY PREVDENT INTERNATIONAL BV

- 1 Replace your current toothpaste and brush your teeth twice a day with the DeSensiDent nHAp™ Tooth Serum and insure you brush just prior to the nHAp™ application.
- 2 Identify the teeth that are giving you sensitivity.
- 3 Once a week, take a fresh DeSensiDent nHAp™ Repairing Serum sponge and apply the nHAp™ formula to your sensitive teeth.
- 4 To release the nHAp™ fluid, place tube between your thumb and index finger. The thumb should rest on the ribbed plastic block.
- 5 Gently press with the thumb on the ribbed plastic block to break the internal lock, which will then release the fluid, to be soaked up by the sponge.
- 6 Squeeze the tube and allow the sponge to soak up the fluid. Once the sponge has soaked up the fluid, apply the fluid to all the sensitive teeth by dabbing the sponge on the tooth surface of the sensitive teeth.
- 7 For optimal results, the formula should be applied and then allowed to sit on the tooth surface for 2 - 3 minutes. Do your best to avoid saliva washing the formula away during this time.
- 8 After 20 minutes you can rinse your mouth with water.
- 9 The nHAp™ Repairing Serum sponges are designed to only be used once, but can be used on all your sensitive teeth during that one application.
- 10 Total treatment time, one month.
- 11 Once treatment is completed, continue your enamel and sensitivity management by using DeSensiDent once every three months and replace your current toothpaste with the nHAp™ Toothpaste for daily use.

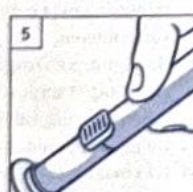

- 1 إستبدل معجون أسنانك الحالي بمصل مزيل الحساسية بالناو هيدروكسي أباتيت وفر بتفريش أسنانك مرتين يومياً به. قبل تطبيق إسفنح النانو هيدروكسي أباتيت حدد السن الذي يسبب لك الحساسية
- 2 يمكنك تطبيق إسفنح النانو هيدروكسي أباتيت مرة واحدة بالإسبوع وفر بتطبيقها على أسنانك الحساسة
- 3 لإطلاق محلول النانو هيدروكسي أباتيت فم بتثبيت الإنبوب بين السبابة والإبهام. حيث يكون الإبهام موضوع على القطعة البلاستيكية المضغوطة كسر الحاجز الداخلي. عندها سوف يعبر المحلول باتجاه الإسفنج البيضاء
- 4 اضغط على الإنبوب للسماح للإسفنجة بامتصاص المحلول وفر بتطبيق المحلول على الأسنان من خلال لمس الإسفنجة بالضغط الخفيف على سطح الأسنان
- 5 للحصول على نتائج أفضل يجب السماح للمحلول بالبقاء على سطح الأسنان لمدة 2-3 دقائق وتجنب غسل اللعاب خلال هذه الفترة
- 6 بعد عشرين دقيقة يمكنك غسل أسنانك بالماء
- 7 إسفنح النانو هيدروكسي أباتيت مضمّن للإستعمال مرة واحدة لكن يمكنك إستعماله لجميع الأسنان الحساسة خلال عملية التطبيق الواحدة
- 8 مدة العلاج شهر واحد
- 9 في حال إكمال مدة العلاج الواحدة، يمكنك إستعمال مجموعة إزالة الحساسية للأسنان كل ثلاثة أشهر وإستبدال معجون أسنانك الحالي بمعجون بريدنت النانو هاي روكسي أباتيت للإستعمال اليومي

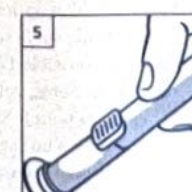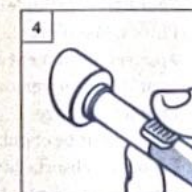

لطلب منتجات العناية بالفم، تواصل مع التاجر المحلي أو قم بزيارة الموقع الإلكتروني www.prevdentshop.com

Bijl. 28.230.v2

For more Excellent Oral Care products visit
www.prevdentshop.com or contact your local dealer
Prevdent International B.V.
1752 PB IJpendam
The Netherlands
T +31 (0)20 66 177 44
E info@prevdent.com
W www.prevdent.com

nHAp™ DeSensiDent
SENSITIVITY RELIEF



DeSensiDent ist dafür vorgesehen, Überempfindlichkeit zu lindern, die durch Kälte, Hitze, süßen und sauren Lebensmitteln entstehen.

PRODUKTBESCHREIBUNG:

DeSensiDent besteht aus zwei Hauptkomponente, die, wenn sie in Kombination benutzt werden, effektiv Empfindlichkeiten für einen längeren Zeitraum reduzieren. Die erste Komponente, das DeSensiDent Tooth Serum wird 2x täglich zum Zähneputzen benutzt und ersetzt die herkömmliche Zahnpasta. Die zweite Komponente, der DeSensiDent nHAp™ Schwamm, wird dann einmal wöchentlich auf die empfindlichen Stellen aufgetragen.

WIE FUNKTIONIERT DESENSIDENT?


Zahnpfempfindlichkeiten entstehen durch geschädigten Zahnschmelz oder freiliegenden Zahnhälsen, was zu exponierten Dentintubuli führen. Diese freiliegenden Stellen lassen es zu, dass sich Flüssigkeiten innerhalb der Tubuli freier bewegen und dadurch an Nerven ziehen oder stossen. Als Folge dieser Bewegung, ist ein Signal vom Nerv zum Gehirn und dies wird dann als Überempfindlichkeit empfunden. DeSensiDent nutzt eine patentierte nano-Hydroxylapatit Formel, um freiliegende Tubuli zu remineralisieren und Zahnschmelz zu reparieren. Durch die Remineralisierung wird der Schmelz wiederhergestellt, offene Tubuli abgedeckt und lindert so Empfindlichkeiten.



SICHERHEITSWARNUNG

Sollten Irritationen auftreten, kontaktieren Sie Ihren Arzt. Verwenden Sie das Produkt nur, wenn Sie auf keinen der aufgelisteten Inhaltsstoffe allergisch reagieren.

- 1 Ersetzen Sie Ihre herkömmliche Zahnpasta und putzen Sie Ihre Zähne zweimal täglich mit DeSensiDent nHAp™ Tooth Serum und versichern Sie, dass putzen bevor das nHAp™ aufgetragen wird.
- 2 Lokalisieren Sie die Zähne, die empfindlich reagieren.
- 3 Nehmen Sie einmal wöchentlich den nHAp™ Schwamm und tragen Sie die Flüssigkeit auf Ihre empfindlichen Zähne auf.
- 4 Nehmen Sie die Ampulle zwischen Daumen und Zeigefinger. Der Daumen sollte auf dem geriffelten Plastikabsatz liegen.
- 5 Drücken Sie vorsichtig mit dem Daumen auf den Plastikabsatz, um den Verschluss zu brechen.
- 6 Lassen Sie die Flüssigkeit in den Schwamm laufen. Ist der Schwamm getränkt, tupfen Sie ihn auf die empfindlichen Zähne.
- 7 Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, sollte das Serum 2 – 3 Minuten einwirken. Vermeiden Sie so gut wie möglich, dass Speichel das nHAp™ von den Zähnen spült.
- 8 Nach 20 Minuten können Sie Ihren Mund mit Wasser ausspülen.
- 9 1 nHAp™ Ampullen können nur einmalig verwendet werden. Eine Ampulle pro Woche.
- 10 Anwendungszeit: 1 Monat
- 11 Wenn die Behandlung abgeschlossen ist, nutzen Sie DeSensident weiterhin einmal alle drei Monate, um anhaltend die Verbesserung des Zahnschmelzes und der Empfindlichkeiten zu erzielen und ersetzen Sie Ihre herkömmliche Zahnpasta mit der nHAp™ Zahnpasta für den täglichen Gebrauch.

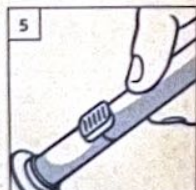

Bitte besuchen Sie unsere Webseite www.prevdent.com, um unsere komplettes Produktangebot kennenzulernen.

DeSensiDent est destiné à soulager l'hypersensibilité dentaire que vous pouvez ressentir avec le froid, la chaleur, l'acide et les sucreries.

DESCRIPTION DU PRODUIT

DeSensiDent possède deux composants principaux qui, utilisés ensemble, réduisent effectivement la sensibilité pendant longtemps. Le premier composant, le sérum dentaire DeSensiDent, doit être appliqué à la brosse deux fois par jour, à la place de votre dentifrice habituel. Le second composant, les éponges DeSensiDent nHAp™, sont ensuite appliquées sur les zones sensibles une fois par semaine.

COMMENT DESENSIDENT PEUT-IL AIDER À SOULAGER LA SENSIBILITÉ DENTAIRE?

L'hypersensibilité des dents est causée par l'émail endommagé et la récession des gencives, qui entraîne l'exposition des tubuli de la dentine. Ces zones exposées permettent aux fluides de se déplacer plus librement dans les tubuli, exerçant une traction ou une pression sur vos nerfs. Le résultat de ce mouvement de fluides est que le nerf envoie un signal au cerveau, que vous percevez comme de la sensibilité dentaire. DeSensiDent utilise une formule brevetée de nano-Hydroxyapatite (nHAp™) afin de reminéraliser les tubuli de dentine exposés et de réparer l'émail endommagé. Le résultat de cette reminéralisation est la réparation de l'émail, en recouvrant les tubuli ouverts, ce qui réduit fortement la sensibilité.



AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ

En cas d'irritation, arrêtez le traitement et demandez conseil à un spécialiste ou prenez contact avec un médecin. L'utilisation est déconseillée si vous êtes allergique à un des ingrédients.

- 1 Remplacez votre dentifrice actuel et brossez-vous les dents deux fois par jour avec le Sérum Dentaire DeSensiDent nHAp™ et assurez-vous de brosser juste avant d'appliquer le sérum à la nHAp™.
- 2 Identifiez les dents qui provoquent chez vous une certaine sensibilité.
- 3 Une fois par semaine, utilisez une nouvelle éponge de Sérum Réparateur DeSensiDent nHAp™ et appliquez la formule nHAp™ sur vos dents sensibles.
- 4 Pour libérer le fluide de nHAp™, placez le tube entre le pouce et l'index. Maintenez le pouce sur le bloc en plastic nervuré.
- 5 Appuyez doucement avec le pouce sur le bloc en plastic nervuré pour rompre le verrou interne, qui libérera alors le fluide, dont vous imbibe l'éponge.
- 6 Pressez le tube et imbibe l'éponge avec le fluide. Une fois que l'éponge a absorbé le fluide, appliquez ce dernier sur toutes les dents sensibles en tapotant l'éponge sur la surface des dents sensibles.
- 7 Pour un résultat optimal, la formule doit être appliquée et ensuite pouvoir rester sur la surface de la dent pendant 2 à 3 minutes. Evitez autant que possible d'éliminer la formule avec la salive pendant ce délai.
- 8 Après 20 minutes, vous pouvez vous rincer la bouche à l'eau.
- 9 Les éponges pour le Sérum Réparateur nHAp™ sont conçues pour être utilisées à une seule reprise, mais elles peuvent être utilisées sur toutes vos dents sensibles pendant cette application unique.
- 10 Durée totale de traitement : un mois.
- 11 Une fois que le traitement est achevé, poursuivez les soins apportés à votre émail et le traitement désensibilisant en appliquant DeSensiDent une fois tous les trois mois et remplacez votre dentifrice actuel par le dentifrice nHAp™ pour les soins quotidiens.



Ne manquez pas de visiter notre site web sur: www.prevdent.com pour découvrir notre sélection complète de produits de soins oraux.

DeSensiDent is ontwikkeld om tand gevoeligheid ontstaan door kou, warmte, zoet en zuur te voorkomen.

PRODUCTOMSCHRIJVING

DeSensiDent bestaat uit twee componenten. Wanneer deze naast elkaar worden gebruikt, reduceert het gevoeligheid voor een langere periode. Het eerste component is de tooth serum. Het is aan te bevelen deze twee keer per dag te gebruiken. Deze tooth serum vervangt uw huidige gebruikte tandpasta. Het tweede component is de DeSensiDent nHAp™ spons, u gebruikt deze 1x per week, te beginnen bij de start van de behandeling.

HOE HELPT DESENSIDENT GEVOELIGHEID TE VOORKOMEN?

Tandgevoeligheid wordt veroorzaakt door beschadigd tandglazuur en optrekkend tandvlees. Dit heeft als gevolg vergrote tandkanaaltjes. Deze kanaaltjes geeft vloeistof de ruimte om vrijelijk te bewegen, met als gevolg irritatie aan de zenuwen. Dit signaal wordt doorgegeven aan de hersenen en wordt als pijn ervaren. DeSensiDent bevat de gepatenteerde nano-Hydroxyapatitie (nHAp™) formule. Deze formule remineraliseert de vergrote kanaaltjes en repareert het beschadigde tandglazuur. Het resultaat van de remineralisatie is gerepareerd tandglazuur door de kanaaltjes op te vullen met nano-Hydroxyapatitie en dit effect heft de tandgevoeligheid op.



VEILIGHEIDS WAARSCHUWING

Als er irritatie ontstaat stopt u met de behandeling en vraagt u advies aan uw specialist of neemt u contact op met de dokterspost. Bent u allergisch voor een van de ingrediënten dan wordt gebruik afgeraden.

- 1 Vervang uw huidige tandpasta door de DeSensiDent nHAp™ tooth serum. Poets twee keer per dag alleen met deze tandpasta, geen andere tandpasta er naast gebruiken.
- 2 Identificeer uw gevoelige tanden.
- 3 Een keer per week gebruikt u het serum met sponsje op de gevoelige tanden. (serum staat voor geconcentreerd) vanwege de hoge concentratie gebruikt u het sponsje helemaal op.
- 4 Om het serum uit het staafje te krijgen, houdt u het vast tussen duim en wijsvinger. Uw duim rust op het geribbelde plastic blokje.
- 5 U drukt zachtjes met uw duim op het geribbelde plastic blokje, op deze manier gaat het staafje open. U kunt nu het serum in het sponsje laten vloeien.
- 6 Zodra het sponsje vol zit met het serum dept u met het sponsje het serum op uw tanden. Doe de gevoelige tanden eerst.
- 7 Voor een optimaal resultaat is het aan te bevelen het serum 2 tot 3 minuten aan te brengen. Een kortere applicatie tijd kan de werking verminderen.
- 8 Na 20 minuten mag u spoelen met water.
- 9 Het nHAp™ serum is ontwikkeld om een keer te gebruiken. U kunt met een sponsje al uw gevoelige tanden behandelen.
- 10 De totale behandelingsduur is 1 maand.
- 11 Na 1 maand, is het advies uw tanden dagelijks poetsen met de nHAp™ tandpasta.



Voor meer informatie over andere producten kunt u onze website raadplegen. www.prevdent.com